

## **XTS Instrumentos**

Conoce uno de nuestros  
productos estrella: XTS instrumentos  
para resina compuesta

P.2



# índice **el** explorador



## **XTS INSTRUMENTOS**

Conoce uno de nuestros productos estrella:  
XTS instrumentos para resina compuesta ..... P.2



## **LÍDERES DE OPINIÓN**

Dr. Atila de Freitas:  
Album de fotografías..... P.6



## **SEÇÃO BRASIL / SECCIÓN BRASIL**

Eventos.....P.8



## **HuFriedyGroup EN LA REGIÓN**

Estos son los eventos a los que  
asistiremos próximamente.  
¡Te estamos esperando! .....P.10

# INSTRUMENTOS SATIN STEEL XTS

## PARA RESINA COMPUESTA

### ¿SABÍAS QUE...?



1

El revestimiento de nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) crea una superficie lisa, extremadamente dura, antiadherente y resistente a las ralladuras.

2

Son hechos de Immunity Steel™ lo que alarga la vida del instrumento.

3

El diseño del mango es suave, grande y liviano lo que lo hace fácil de limpiar y crea menos fatiga para un mayor control y máxima comodidad.<sup>1</sup>

4

Ofrecen una amplia variedad de diseños para todas las necesidades de colocación de resina compuesta.

5

El acabado negro genera un mejor contraste entre el instrumento, la estructura del diente y el material de resina compuesta. Este recubrimiento no se desprende ni mancha la restauración.

<sup>1</sup> Fuente: Gerwatowski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene, February 1992.

### ▶ INSTRUMENTOS SATIN STEEL XTS



## CONSEJOS SENCILLOS Y PRÁCTICOS

- Los instrumentos para resina compuesta deben ser limpiados con acetona simple antes de reprocesarlos. Esto elimina los restos de resina que se puedan acumular después de trabajar con ellos y alarga la vida del mismo. Después de esto se deben de limpiar y esterilizar como corresponde.



- Para cada necesidad, una opción; hay un kit de instrumentos para resinas anteriores y uno para resinas posteriores.
- Cada uno con 5 instrumentos:
  - TNANTKIT<sup>2</sup> para colocar, condensar y modelar la resina compuesta en restauraciones de la región anterior
  - TNPOSKIT<sup>3</sup> para restauraciones de clase I y II realizadas en la región posterior.



- Para evitar accidentes con punzocortantes y tocar los instrumentos lo menos posible durante el procesamiento, utilice un sistema de manejo de instrumental como el IMS.




Descarga el XTS folleto

Dr. Atila de Freitas

# ALBUM DE FOTOGRAFÍAS



El Dr. Atila de Freitas, Odontólogo Brasileño creó un álbum de fotos muy especial para mostrar instrumentos de HuFriedyGroup

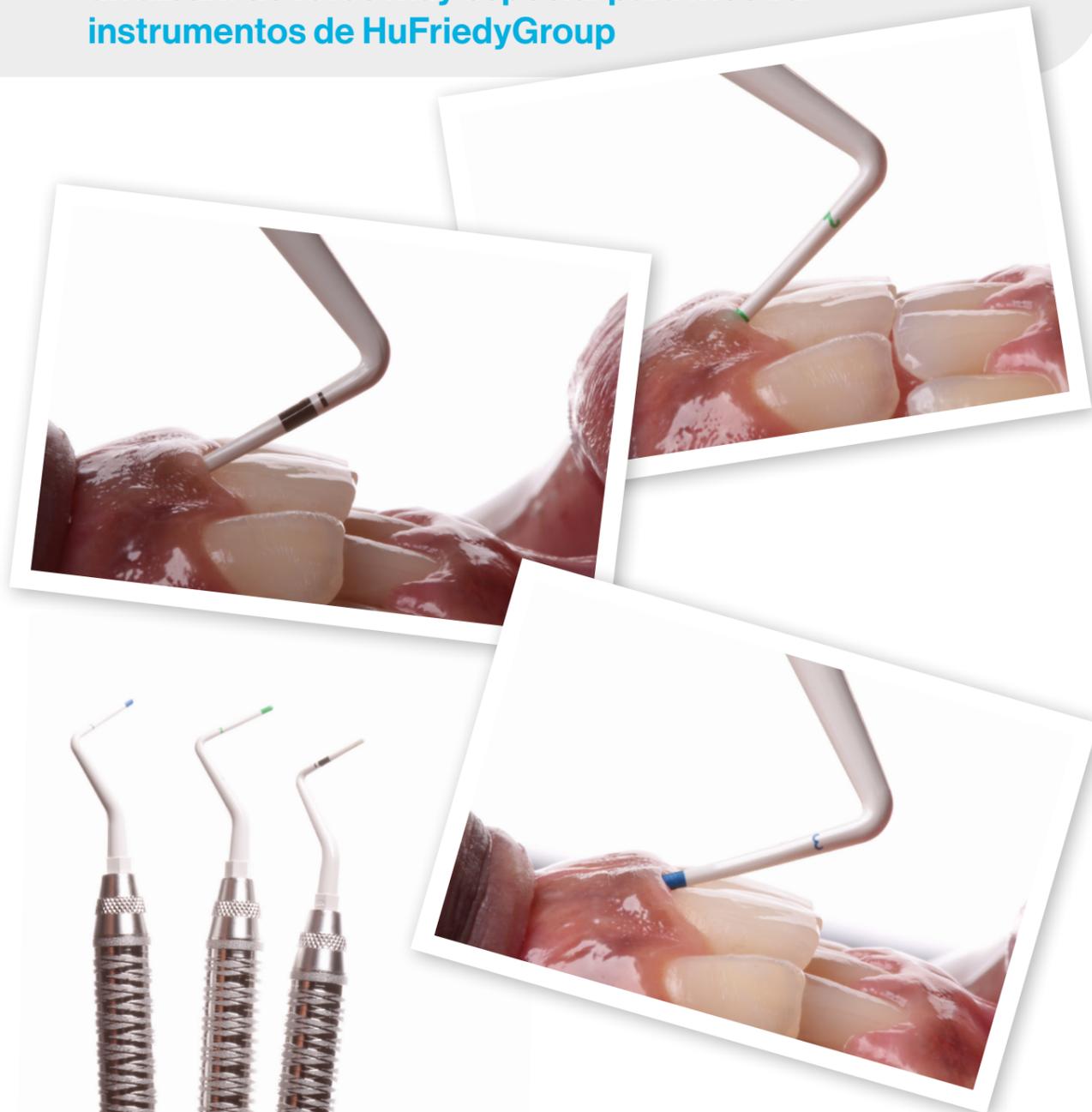

► ALBUM DE FOTOGRAFÍAS Dr. Atila de Freitas



## Colorvue™ Biotype Probes




Utilice la sonda blanca primero. Insértela en el surco gingival con < 30g de presión. Si es visible, ósea, si puede ver el color a través del tejido gingival, el biotipo es delgado.



Si no es visible, utilice la sonda verde de la misma manera. Si el color es visible, el biotipo es mediano.



Si la sonda verde no es visible a través del tejido gingival, use la sonda azul. Si el azul es el único color visible a través del tejido gingival, el biotipo es grueso. Si no se ve algún color, ni siquiera el azul, el biotipo es muy grueso.

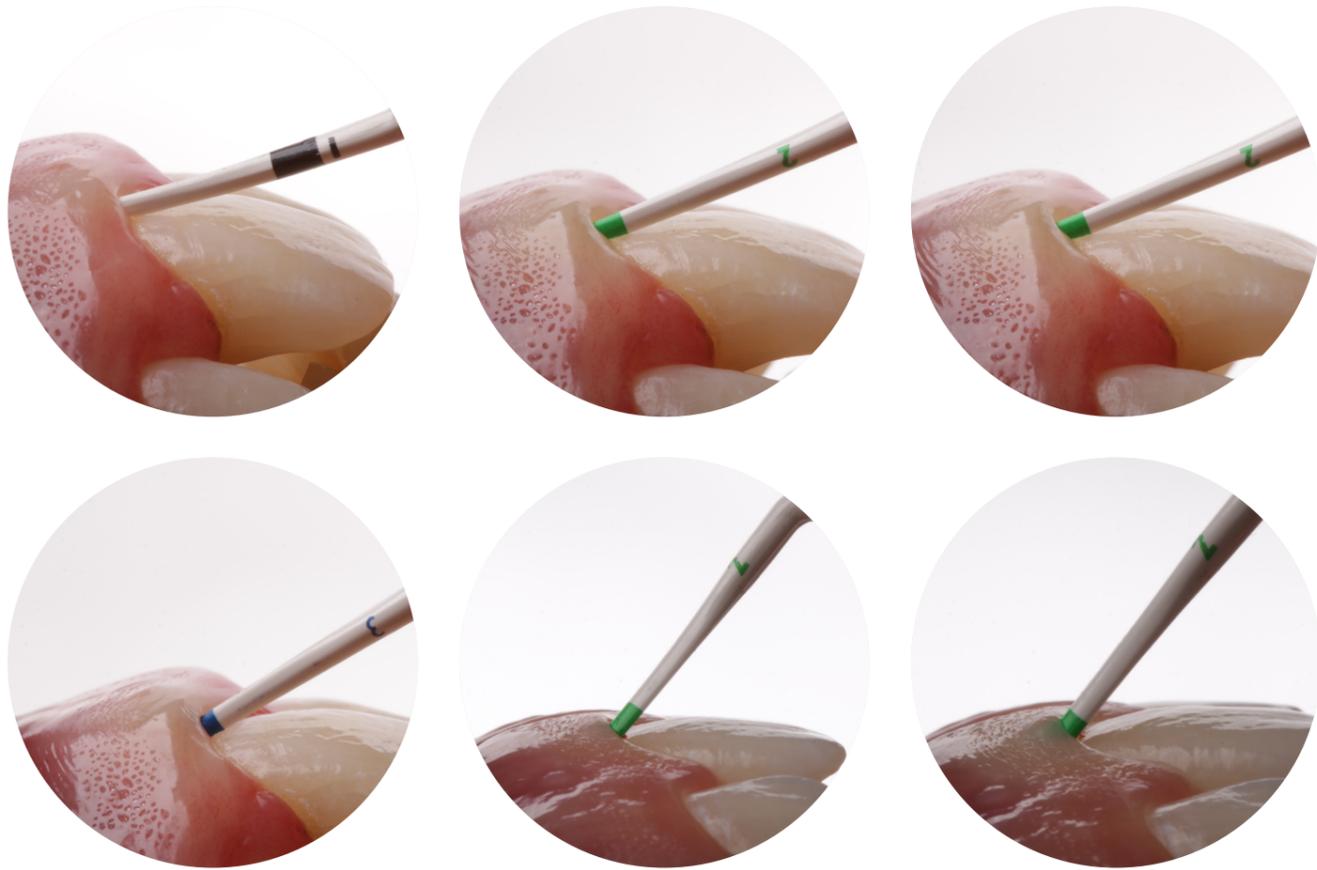

### Calibrador de proporción



- ▶ **Chu's Calibrador de proporción**  
[mira aquí](#)
- ▶ **Chu's Crown Lengthening Gauge**  
[mira aquí](#)
- ▶ **Chu's Sounding Gauge**  
[mira aquí](#)



Dr. Carlos Monteagudo, Líder de Opinión

## PERIO TIP CON EL DR. CARLOS MONTEAGUDO

El Dr. Monteagudo nos muestra como utilizar su kit de Cirugía Plástica Periodontal.



Descarga el [Brochure del Kit](#)



Para mayor información sobre el kit, haga [click aquí](#).

## SEÇÃO BRASIL

### Eventos

## SECCIÓN BRASIL

### Eventos



## SOBRAPE

Um evento único foi organizado por periodontistas da SOBRAPE - Sociedade Brasileira de Periodontia entre os dias 10 e 11 de março de 2023, no Rio de Janeiro. O propósito do evento PERIO POR ELAS foi apresentar o que há de mais moderno em Periodontia apenas por palestrantes mulheres. Professoras renomadas nacional e internacionalmente palestraram durante 2 dias, para 320 congressistas.

A HuFriedyGroup esteve presente no evento com seu stand, e um curso hands-on exclusivo. ▶

Los periodoncistas de SOBRAPE (Sociedad Brasileña de Periodoncia) organizaron un evento único durante el 10 y el 11 de marzo de 2023, en Río de Janeiro. El propósito del evento "PERIO POR ELLAS" fue que sólo mujeres presentaran lo más moderno en Periodoncia }. Profesoras de renombre nacional e internacional dieron conferencias durante 2 días a 320 participantes. HuFriedyGroup estuvo presente en el evento con su stand y un curso práctico exclusivo. ▶



## APCD

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) promove anualmente o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) há mais de 60 anos. O evento traduz as inovações do mercado odontológico e aperfeiçoamento profissional de forma criativa, produtiva e inovadora. Sendo o primeiro grande evento do ano, o CIOSP põe em prática pilares importantes na formação dos profissionais da área, e traz grandes nomes do setor e marcas do mercado para apresentar tecnologia de ponta, excelência científica e experiências transformadoras.

A Hu-Friedy esteve presente no CIOSP em Janeiro de 2023, com um lindo stand de 60 metros quadrados. Tivemos a visita do Dr. Octavio Real e da Dra. Laura Sanchez no nosso evento.



La Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas (APCD) promueve anualmente el Congreso Internacional de Odontología de São Paulo (CIOSP) desde hace más de 60 años. El evento presenta las innovaciones del mercado dental y la mejora continua profesional de una manera creativa, productiva e innovadora. Siendo el primer gran evento del año, CIOSP pone en práctica importantes pilares en la formación de profesionales del área, y trae grandes nombres del sector y marcas en el mercado para presentar tecnología de punta, excelencia científica y experiencias transformadoras. Hu-Friedy estuvo presente en CIOSP en enero de 2023, con un hermoso stand de 60 metros cuadrados. Tuvimos la visita del Dr. Octavio Real y la Dra. Laura Sánchez en nuestro evento.



# HuFriedyGroup EN LA REGION

Estos son los eventos a los que asistiremos próximamente.  
**¡Te estamos esperando!**

**21 al 22 de Abril**  
**CODIGITAL**  
Santiago de Chile



**21 al 24 de Abril**  
**AAO**  
Chicago



**3 al 7 de Mayo**  
**AMIC**  
Ciudad de México



**5 al 6 de Mayo**  
**EFP**  
León



24 al 27 de Mayo

**AMECEE**

Guadalajara



18 al 20  
de Septiembre

**ACPO**

Cartagena



1 al 3 de Octubre

**SCO**

Medellin



1 al 3  
de Noviembre

**AOA**

Buenos Aires



28 al 30  
de Septiembre

**ARIC**

Guadalajara



14 al 18  
de Noviembre

**FOCAP**

El Salvador



4 al 7 de Octubre

**AMP**

León



15 al 19  
de Noviembre

**AMIC**

Ciudad de México



# REVISTA CULTURA DENTAL

# el•explorador

N°24 | MAYO 2023



Visite nuestro sitio [HuFriedyGroup.com/latin-america](https://www.HuFriedyGroup.com/latin-america)

Sus comentarios, preguntas y sugerencias son importantes para nosotros.  
Póngase en contacto: [lsanchez@hu-friedy.com](mailto:lsanchez@hu-friedy.com)

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • [HuFriedyGroup.com/latinoamerica](https://www.HuFriedyGroup.com/latinoamerica)  
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.  
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. HFL-590LA/2304